

2

Ролла
в подушке



3 режима
вращения



Таймер



Кожанная

10

Массажных
элементов

9

Программ
массажа



Модуль
массажа
для ног



Надувная
подушка
под поясницу

3

Режима
подогрева

9

Режимов
скорости

Массажная накидка

Модель: FMM-002

Номинальная мощность: 36 Вт

Номинальное напряжение: 12 В

Рабочее время: таймер до 30 мин.



Сделано в Китае



FELFRI


FMM-002



МАССАЖНАЯ НАКИДКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

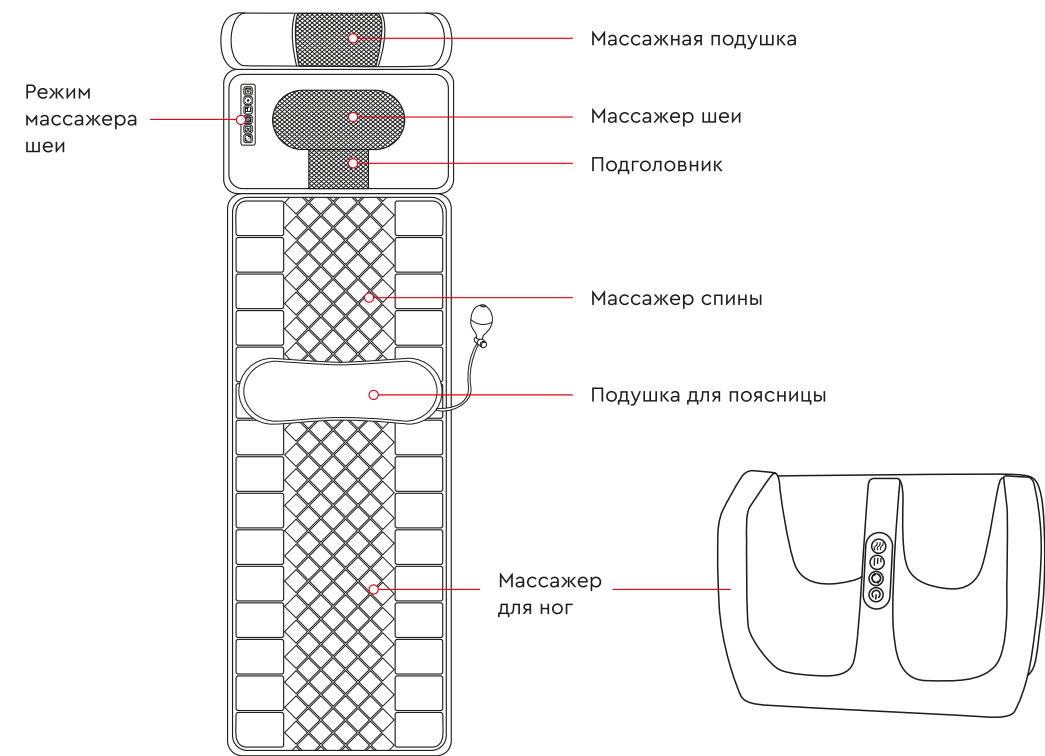

ПУЛЬТ НАКИДКИ

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПУЛЬТ МАССАЖЕРА СТОП

ПУЛЬТ МАССАЖЕРА ШЕИ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую хлопчатобумажную ткань. Не используйте агрессивные моющие средства.
- После использования положите массажер в упаковочную коробку или в безопасное, сухое и прохладное место. Не обматывайте шнур питания вокруг изделия.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство сами. Если требуется ремонт, обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массажная накидка
Модель: FMM-002
Номинальная мощность: 36 Вт
Номинальное напряжение: 12 В
Рабочее время: таймер до 30 мин.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как пользоваться пультом массажера стоп:
1. Кнопка режима ожидания: нажмите кнопку режима ожидания, чтобы перейти к автоматическому массажу. По умолчанию время составляет 15 минут (автоматическое переключение между режимами + и -).

- 2. Клавиша направления: нажмите клавишу направления, чтобы изменить направление массажной головки. Нажмите один раз для массажа в прямом направлении, а затем нажмите один раз для массажа в обратном направлении.
- 3. Кнопка регулировки силы: нажмите эту кнопку в первый раз после запуска, чтобы переключиться на сильную передачу, а затем нажмите ее еще раз, чтобы переключиться далее. На выбор предлагаются три передачи.
- 4. Кнопка подогрева: нажмите кнопку подогрева для выбора теплого массажа. Нажмите один раз для включения теплого массажа, а затем нажмите еще раз для его завершения.
- 5. Во время работы массажера нажмите кнопку ожидания, чтобы выключить функцию массажа, и массажер перейдет в режим ожидания. Положите массажную накидку на диван или кровать, плотно вставьте адаптер постоянного тока массажной накидки и вставьте вилку адаптера питания в сетевую розетку. В это время на дисплее пульта ручного управления появится «off», означающее, что питание массажного матраса включено правильно, и можно приступить к следующему этапу.

ИНСТРУКЦИЯ К ШЕЙНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ

- 1. Кнопка ожидания: нажмите эту кнопку, чтобы запустить устройство одним нажатием, и оно перейдет в автоматический режим. Нажмите ее второй раз, чтобы выключить устройство.
- 2. Кнопка направления: при запуске по умолчанию используется одноминутное вращение вперед и назад. Нажмите эту клавишу в первый раз, чтобы включить функцию прямого вращения: нажмите еще раз, чтобы включить функцию обратного вращения.
- 3. Кнопка регулировки силы: Данное устройство имеет три уровня регулировки силы, по умолчанию при запуске установлен средний уровень. Нажмите эту клавишу в первый раз для работы на низкой передаче; нажмите эту клавишу еще раз для работы на высокой передаче; нажмите еще раз для возобновления работы на средней передаче.
- 4. Кнопка подогрева: по умолчанию при запуске включается функция подогрева. Нажмите эту клавишу в первый раз, чтобы выключить функцию подогрева; нажмите эту клавишу еще раз, чтобы снова включить подогрев.
- 5. Кнопка энергосбережения: энергосберегающая конструкция. Нажмите эту клавишу, чтобы перейти в режим энергосбережения.
- 6. Кнопка умного режима: во включенном состоянии нажмите эту кнопку три раза, чтобы испытать три различных режима умного массажа, нажмите четвертый раз, чтобы переключиться на первый режим интеллектуального массажа, и так далее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА НАКИДКИ


- 1. Кнопка ожидания: нажмите эту кнопку, чтобы на дисплее появилось "10", и массажная накидка начнет работать. В это время она находится в автоматическом режиме, и по умолчанию работает 10 минут. Нажмите еще раз, чтобы отобразилось "20", и начнется 20-минутный отсчет времени. Затем нажмите еще раз, чтобы отобразилось "30", и запустите 30-минутный режим. Наконец, нажмите еще раз, чтобы отобразилось "off", и массажная накидка прекратит работу.
- 2. Режим: нажмите эту кнопку для выбора 9 различных режимов вибромассажа всего тела: "F1" - "F8" - "Au", всего можно выбрать 9 режимов.
- 3. Регулировка силы: нажмите эту кнопку для увеличения или уменьшения силы вибромассажа, всего можно выбрать 9 уровней силы, а именно "S1" - "S9".
- 4. Скорость: нажмите эту кнопку для ускорения или замедления частоты вибромассажа, всего 9 регулируемых скоростей, а именно " L1" - "L9".
- 5. Позиционирование: нажмите эту кнопку для управления зоной массажа различных частей, на дисплее отобразятся "P1" - "P4". Всего можно настроить 4 различные зоны.
- 6. Подогрев: нажмите эту кнопку для включения функции подогрева массажной накидки, на дисплее отобразятся "H1" - "H3", всего три регулируемые передачи. Когда на дисплее отображается "HO", функция подогрева спины массажного матраса может быть отключена.

Вопросы, требующие особого внимания

- После использования или перед чистой выньте вилку из розетки.
- Устройство запрещено использовать во влажной среде и в ванной комнате.
- После использования храните его в сухом, темном месте.
- Не используйте его во время сна, чтобы длительная стимуляция определенной части тела не повлияла на здоровье.
- Не используйте массажер в течение получаса после приема пищи.
- Если во время использования массажера возникают неприятные ощущения из-за чрезмерной стимуляции, прекратите использование немедленно.
- Во время беременности, при патологических физических состояниях, таких как боли в костях позвоночника, острые заболевания, болезни сердца и т.д., следует использовать аппарат под руководством врача.
- После массажа рекомендуем выпить небольшое количество теплой воды или чая, это поспособствует выведению из организма метаболитов.
- При повреждении шнура питания данного обратитесь к продавцу. Запрещается самостоятельно заменять шнур.
- Данный прибор не рекомендуется использовать людям (в том числе детям) с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или нервными дефектами или отсутствием соответствующего опыта, если только они не находятся под присмотром и руководством опекуна.
- Использование устройства детьми или людьми с физическими ограничениями должно производиться только под наблюдением опекуна.
- Поверхность устройства горячая. Если вы не ощущаете тепло, пожалуйста, используйте прибор под наблюдением.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЯСНИЧНОЙ ПОДУШКИ

Нажмите на шарик подушки, чтобы надуть поясничную подушку. Нажмите кнопку сдутия, чтобы сдуть подушку поясничного отдела (пользователи смогут регулировать в соответствии с собственным уровнем комфорта).

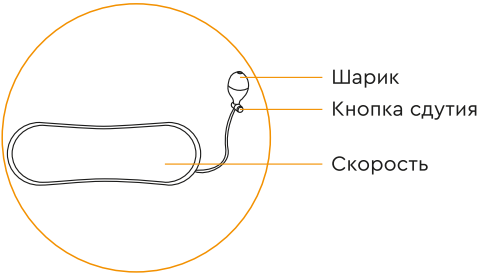

АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Основные неисправности	Возможные причины	Метод решения
Устройство не работает	Падение напряжения. Адаптер не подключен к розетке. Включена кнопка режима ожидания. Не подключен адаптер постоянного тока массажного матраса.	Уточнить в соответствующей службе. Правильно и плотно вставьте адаптер в розетку переменного тока. Нажмите на кнопку режима ожидания. Плотно вставьте адаптер в гнездо переменного тока.

Шум	Неправильное размещение	Отрегулируйте положение
Сверхинтенсивность	Слишком низкое напряжение сети	Используйте стабилизатор напряжения

УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

 Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления:

Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:

Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект, - с нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С уважением, команда FELFRI!



+7 (916) 572 30 93



uqas.official@gmail.com



@uqas_support



FELFRI.RU

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.