

FELFRI

FTB-001

4

НАСАДКИ

ЗВУКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Из-за высокочастотной вибрации щетинок при первом использовании у некоторых групп людей может возникнуть зуд или покалывание и ощущение солёности во рту, что является нормальным и исчезнет после повторного использования.

Внимание

- Регулярно проверяйте корпус, зарядную док-станцию и шнур питания на наличие повреждений.
- Если у Вас проходит лечение полости рта, то пожалуйста, перед использованием щетки проконсультируйтесь со своим стоматологом.
- Не позволяйте детям играть с данной щеткой.
- Детям до 3-х лет, запрещено пользоваться данной щеткой.
- Для детей дошкольного возраста, использование данной зубной щетки разрешено только под родительским присмотром.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

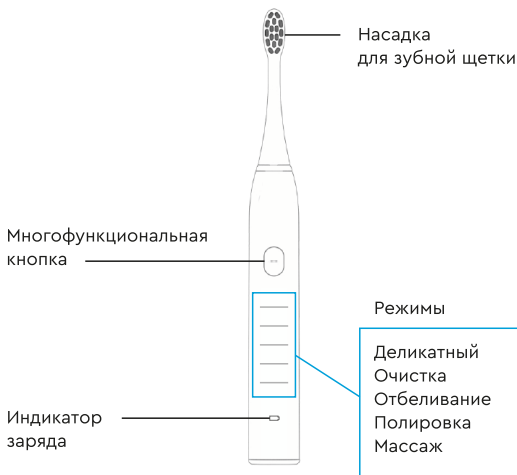

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FTB-001

Входное напряжение: 5 В

Выходное напряжение: 3.7 В


Номинальная мощность: 1.5 Вт

Количество использований: 40 или 80 раз в зависимости от режима (режим работы варьируется в зависимости от реального использования)

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Шаг 1:

Установите щетку на зарядную станцию в нижней части, индикатор зарядки начнет мигать. Индикатор всегда горит, когда продукт полностью заряжен и готов к использованию.

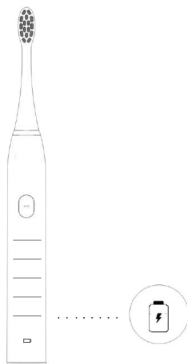

Шаг 2:

Установите насадку на металлический стержень корпуса щетки. Если между корпусом и насадкой будет выраженный зазор, то зубную щетку можно использовать в обычном режиме.

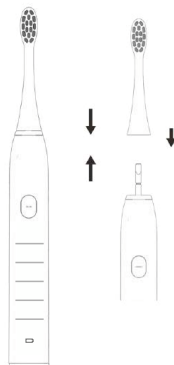

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Шаг 3:

Во время режима ожидания, нанесите зубную пасту на насадку.



Шаг 4:


Насадка должна плотно прилегать к поверхности зубов.

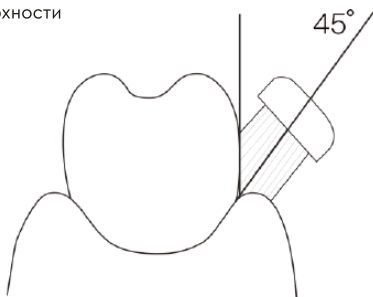

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шаг 5:

Чтобы включить электрическую зубную щётку, нажмите на многофункциональную кнопку.

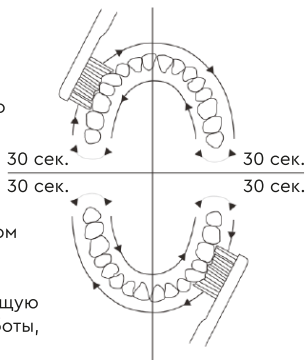

Щетка оснащена таймером по 30 секунд на каждую из зон. Она подскажет, когда перейти на следующую зону. Через 2 минуты работы, щетка автоматически отключится.

рис 1

Шаг 6:

Кратковременно нажмите на многофункциональную кнопку для включения, повторное кратковременное нажатие приведет к переключению режимов (покупателям, использующим данную зубную щетку впервые, рекомендуется выбирать уровень интенсивности с более слабой вибрацией, чтобы уменьшить дискомфорт)



НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шаг 7:

По завершении использования, пожалуйста промойте насадку чистой водой.



Шаг 8:

Если по завершению использования зубной щетки индикатор мигает красным светом - это означает, что аккумулятор разряжен.

Пожалуйста зарядите зубную щетку. Во время зарядки индикатор мигает зеленым светом. Когда батарея полностью заряжена - индикатор горит зеленым светом.



УЗНАЙТЕ, КАК ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ПРАВИЛЬНО

1. Правильным хватом будет хват, при котором большой палец руки будет поднят вверх.
2. Направьте зубную щетку на место прилегания зубов к деснам. При чистке верхнего ряда зубов, щетина должна быть направлена вверх, при этом немного покрывая десна. Совершайте короткие, горизонтальные движения щеткой. При чистке нижнего ряда зубов, щетину нужно вести под углом таким образом, чтобы боковые стороны щетины так же задевали зубы. (Щетину нужно вести под углом в 45-60 градусов таким образом, чтобы боковые стороны щетины так же задевали зубы, и сама щетина не расходилась в разных направлениях на зубе.)
4. Расположив зубную щетку в ротовой полости, начните делать короткие горизонтальные движения, чистя по два зуба за раз, движениями вперед-назад, производя около десяти повторений.
5. Во время чистки зубов, начните саму чистку с последнего, верхнего, правого зуба. Производите чистку зубов, в направлении с права на лево; затем чистите левую окклюзионную поверхность зуба, левую лингвальную сторону, затем вернитесь к правой лингвальной стороне и затем к правой окклюзионной поверхности зубов.

УЗНАЙТЕ, КАК ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ПРАВИЛЬНО

Если вы будете чистить зубы в таком порядке, то Вы ничего не пропустите. (Существует формула очередности для чистки зубов: всегда начинать справа и заканчивать справа).

6. При чистке окклюзионной поверхности чистите по два зуба движениями вперед и назад.

7. Лингвальная сторона задних зубов верхней челюсти является менее удобной зоной для чистки, при этом щетина должна все еще быть направлена в сторону сочленения зубов и десен, а ручка щетки должна прилегать к большим резцам. При чистке правой лингвальной стороны ручка щетки, естественно, будет направлена влево. Поэтому мы рекомендуем использовать левую руку для чистки лингвальной стороны правых задних зубов.

8. Когда вы чистите большие коренные зубы со стороны щеки, то делайте так: чистите правую сторону - правой рукой, а левую сторону - левой рукой. И держите ручку щетки таким образом, чтобы у вас был хороший обзор полости рта.

9. После чистки верхнего ряда зубов используйте тот же принцип и метод для чистки нижнего ряда зубов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды! Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления: Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка: Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если устройство не работает, повреждено или содержит неполный комплект, - с нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С уважением, команда FELFRI!

 +7 (916) 572 30 93

 @uqas_support

 uqas.official@gmail.com

 FELFRI.RU

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения конструктивных или схематических изменений самостоятельно или третьими лицами:
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и иными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.



Режимов



IPX7

влагозащита



**Таймер 2 минуты
по 30 секунд**

Звуковая электрическая зубная щетка

Модель: FTV-001

Входное напряжение: 5 В

Выходное напряжение: 3.7 В

Номинальная мощность: 1.5 Вт

Количество использований

от одного заряда батареи: 40 или 80 раз

**в зависимости от режима (режим
работы варьируется в зависимости
от реального использования)**

EAC CE RoHS



Сделано в Китае